


# MTM 系统测量设备使用说明

\* 文档以血氧仪为例进行说明，其它设备的对接方式与血氧仪原理相同。

## 1.开启设备

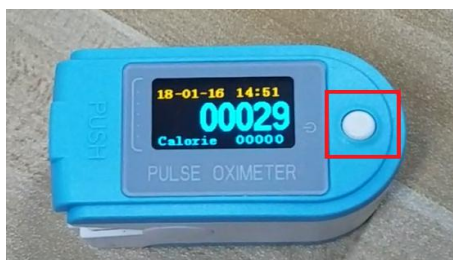

## 2.连接设备

2.1 打开手机的 WiFi 开关和蓝牙开关，确保手机可以访问外网、已扫描周围蓝牙设备。



2.2 选择对应的测量仪器进行蓝牙配对

每个设备有唯一的标识，通常位于设备小条码下面。当手机通过蓝牙搜索设备时，开通过这个标识，方便地找到设备。



## 3.安装并打开 APP

3.1 把安装包拷贝到手机，点击安装包安装即可。



3.2 打开 APP，输入登录信息，账号和密码与登陆 PC 端的相同。




3.3 登陆成功后，已配对的设备会出现在列表中，要连接到测量设备获取数据，或者切换不同设备，需要点击“同步”按钮（如果设备没有新的测量数据，系统会提示“无新数据”，这同样说明设备连接成功了）。



#### 4.数据与交互屏同步

点击交互屏的“体验一下”按钮，在选择界面选择要测量的指标，这里以血氧为例，点击“血氧”按钮，交互屏开始播放等待动画。

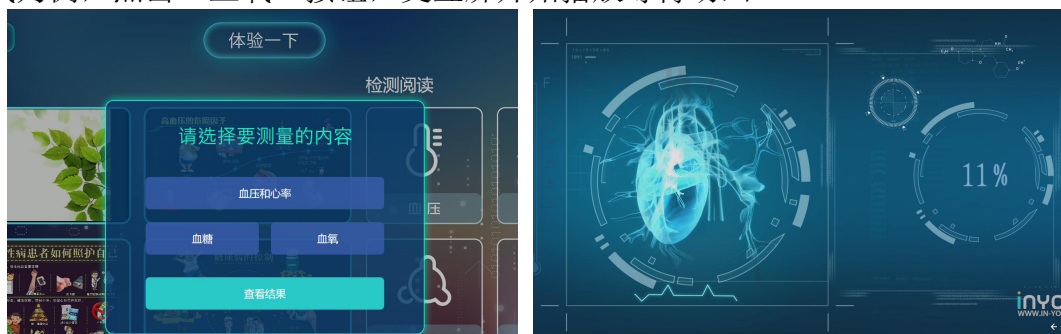

## 5.开始测量

使用设备测量相应的指标。



## 6.测量完成

测量完成后，数据会被 APP 及时获取到，并自动上传到服务器。



数据上传完成后，交互屏也会及时获取到测量结果，并停止播放等待动画，重新返回选择界面。

如果用户还需要测量其它指标，可回到步骤 3.2，切换到相应设备，重复后续操作步骤。

如果用户不在测量，点击“查看结果”按钮，交互屏会将测量结果显示在交互屏上。

